

V3



Wärmetherapie und ihre erstaunlichen Wirkungen



1 Erweckt Immunsystem



2 Steigerung der Blutzirkulation



3 Steigerung des Stoffwechsels

III. Resultat der fortgeschrittenen Wissenschaft in der Alternativmedizin des Jahres 2012



Erstaunlich und überraschend



Das ausziehbare Design der Ergänzungsmatte ist platzsparend und komfortabel.

- 1** **Sensationell** (Scanning) Exakte Massage durch Wirbelsäulenvermessung
- 2** **Überraschend** (Up-Down) Intensitätswahl von Massage nach Wunsch
- 3** **Besonders** (Mode) Massageprogramm nach alternativmedizinischen Aspekt zur Verbesserung der Gesundheit
- 4** **Ausgezeichnet** (Sound) Ceragem Sound für Körper und Seele
- 5** **Intelligent** (Design) Platzsparend und komfortable Anwendung



Contents

5 Besonderheiten der CGM MB-1101

Besonderheiten	
1	<p>Konturenerfassung</p> <p>Auf meine Körperlänge angepasste Massage erhalten. Alle Familienangehörige (inkl. Kinder) sollten es benutzen können, obwohl die Länge des Massagebereichs unterschiedlich ist.</p>
2	<p>Einstellung der Massagestärke 1~6Stufen (Standard Stufe 3)</p> <p>Ich möchte meiner Verfassung angepasste Massagestärke (hart/weich, höher/niedriger) erhalten.</p>
3	<p>Programm nach Alternativmedizin Automatik(4) Semi-automatik(1) Manuel(1)</p> <p>Kann ich während einer Massage einen bestimmten Bereich (Hals, Rücken, Hüfte,...) gezielt behandeln? Da nur 1 Programm angeboten wird, hatte ich keine Wahl. Gibt es denn keine weiteren Programme? Ich habe bereits lange zuvor die Liege benutzt. Gibt es denn das alte, bewährte Programm?</p>
4	<p>Ceragem Sound 1-10 Sound (Naturklänge + Klassik + funktionelle Musik)</p> <p>Wirklich faszinierend. Körper und Seele im Einklang.</p>
5	<p>Smart Design</p> <p>Ich möchte platzsparende Aufstellungsmöglichkeit. Die Funktionsweise der Fernbedienung ist zu komplex. Welche Seite ist Kopfseite bei Benutzung?</p>

Die Wirbelsäule eines jeden Menschen hat individuelle Maße und Krümmungen, jedoch möchte jeder eine seinem Körper angepasste Massage erhalten!



V3 Besondere Vorteile




- Messung von Länge und Krümmung der Wirbelsäule
- Jeder Anwender bekommt seine individuelle Massage



- Vom HWS bis zum Steißbein werden individuelle Massagepunkte (30 Punkte) erfasst und die Meridiane stimuliert.



- Durch die punktgenaue Stimulation der Meridiane werden die Stoffwechsel gefördert

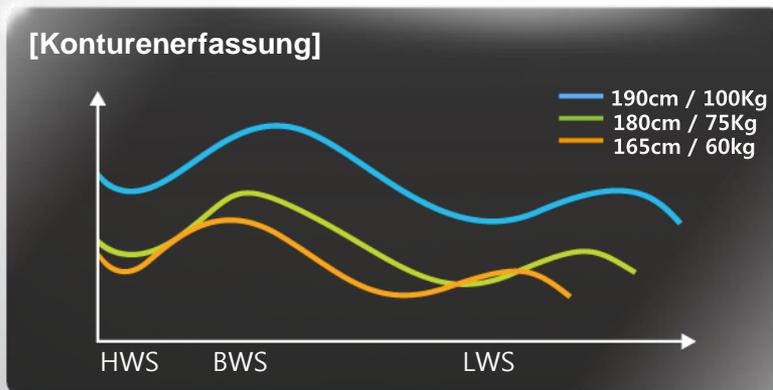

V3 Besondere Vorteile

- **Massagestärke nach Bedarf**

Für Anfänger, zur Eingewöhnung

Die Erfahrenen, für mehr Freude

Weich!



Hart!



- **6 Stufen Härteeinstellungen wählbar**



1단계



2단계



3단계



4단계



5단계



6단계

V3 Eigenschaften

SemiAutomatik (Dauer ca.18 Minuten, Scan wird nicht angewandt)

Interner Projektor wird an die gewünschten Bereiche (z.B. Hals, Rücken, Gesäß, ..) positioniert.

- Von dieser Position aus wird dann der Modus automatisch ausgeführt.
- Ober- und unterhalb des gewählten Bereichs wird massiert.



V3 Eigenschaften

Zahlreiche Programme für maximale Massage-Effekte

Programm	Modus	Dauer	Wärme/Moxa-Anwendungen	Besonderheiten
Automatik (10)	Auto (V3 Standard)	36min 30sek	15x (Moxa 2x, Reiben 2x)	Verbesserung der Blutzirkulation, Linderung bei Muskelschmerzen und Gelenksbeschwerden
	Modus 1 (M3500)	36min 30sek	16x	Wie Ceragem-E
	Modus 2(Relax)	18min	-	Rückenmuskelmassage zur Entspannung: Stressabbau, Beruhigung
	Modus 3: Beruhigung	36min 30sek	4x (Moxa 2x, Reiben 2x)	TCM Basierend. Anregung der Verdauung
	Modus 4: Zirkulation	36min 30sek	6x (Moxa 2x, Reiben 2x)	Förderung der Blutzirkulation
	Modus 5: Basic	36min 30sek	9x (Moxa 2x, Reiben 2x)	Zur Steigerung des Immunsystems

V3 Eigenschaften

Zahlreiche Programme für maximale Massage-Effekt

Programm	Modus	Dauer	Wärme/Moxa-Anwendungen	Besonderheiten
Auto (10)	Modus 6: Energie	36m 30s	8x (Moxa 2x, Reiben 2x)	TCM basierend zur Energiesteigerung
	Modus 7: Konzentration	36m 30s	9x (Moxa 2x, Reiben 2x)	Chiropraktik (Kopf, Augen, Nase, Lungen Meridiane): Verstärkte Blutzirkulation fürs Gehirn
	Modus 8: Schlaf	36m 30s	7x (Moxa 2x, Reiben 2x)	TCM basierend (Leber, Nieren-Meridiane): Schlaf
	Modus 9: Bodyline	36m 30s	10x (Moxa 2x, Reiben 2x)	Meridiane Massage: (Akupunkturpunkte): gegen Fettleibigkeit
Semi-Auto(1)	Teilbereich Wiederholungen (keine Scanfunktion)	18m	2x Reiben →Stop→Moxa 3x (Wiederholung)	Wiederholende Massage um bestimmten Bereich
Manuell(1)	Modus: Manuell Keine Scanfunktion	60m	5 Minutenweise bewegen	Von Anwender ausgewählter Bereich wird mit Wärme behandelt: Maximal 5 Minuten Verweildauer wegen Verbrennungsgefahr

V3 Eigenschaften

**Zahlreiche Programme für den Anwender
Für Massageauswahl und Wirkungsmaximierung**

Automatik (10 Programme)



V3 Standard



Ceragem-E (Vorgängermodell)



Relax Modus



Diverses

Die gesundheitsfördernde Wirkung von Musik im Hinblick auf Stressabbau und verbesserten Schlaf ist bekannt. Sie hilft auch bei Schmerzlinderung und sorgt für positives Lebensgefühl.



Naturklänge: Einklang mit Körper, Entspannung, Stressabbau



Klassische Musik: Stressabbau, Blutdruck, Mentale Sicherheit



Funktionale Musik: Klare Gedanken, körperliche Erholung



**Ceragem Sound ist standardmäßig mit (1-10) Titeln, jedoch optional auf (11-100) Titel erweiterbar

Hintergrund

Bisheriges Produkt konnte aufgrund der Bauweise nicht beliebig platziert werden

V3 ist vielfältig anwendbar aufgrund der Neugestaltung sowie modernem Design.



V3 Eigenschaften

Im Center als Liege durch ausziehen des Ergänzungsteils



Zuhause: als Liege und Sofa mit Heizfunktion einsetzbar



**Platzsparende Bauweise:
nach belieben aufstellbar**



GLOBAL CERAGEM

2,000,000

세라젬 온열기 200만대 돌파기념 BIG 3 Chance!!

During : 2014. 10. 14 (Mon) - 12. 31 (Wed)



Weltweit zufriedene Kunden mit Ceragem

(Bis heute wurde CERAGEM-Produkte weltweit über zwei Million Mal verkauft)

Verleih und Zuhauseanwendung



CERAGEM Global Network

Seit 16 Jahren



73 Länder Weltweit

World Best Healthcare Partner™

CERAGEM is expanding worldwide, serving over 72 countries and receiving high accolades from people everywhere for our incredible effectiveness.

